

## MoliMed® Pants for men



Spez.-Nr.: D 3.1234

Abteilung: CHO - ID

Datum: 31.07.2013

### 1. Allgemeine Produktbeschreibung

Inkontinenz-Hose für Männer mit anatomisch geformtem Saugkern. Die textile Außenseite und die speziell entwickelten flüssigkeitsabweisenden Innenbündchen in Kombination mit einer anatomischen Paßform sowie einem elastischen Beinabschluß bieten bestmöglichen Schutz vor Auslaufen in jeglicher Lebenssituation und zuverlässigen Tragekomfort. Die Haut wird durch die spezielle Dry-Plus Lage und dem hautfreundlichen pH Wert von 5,5 geschont und vor Rücknässung und Reizung geschützt. Die vollflächige Vliesabdeckung und die ausgedehnte Elastifizierung ermöglichen es, das Produkt unauffällig zu tragen und es wie eine normale Unterhose an- und auszuziehen.

### 2. Anwendung

Bei leichter bis mittlerer Harn- oder Stuhlinkontinenz für mobile Patienten. Durch einfache Handhabung besonders geeignet für den Einsatz beim Toilettentraining. MoliMed® Pants for men bietet aber auch durch den rundum sicheren Sitz bei der Versorgung unruhiger oder verwirrter Patienten größtmögliche Sicherheit.

Produkteinstufung gemäß EG-Rahmenrichtlinie für unsterile Medizinprodukte der Klasse I.

### 3. Aufmachung

|                        | Medium<br>(M) | Large<br>(L) |
|------------------------|---------------|--------------|
| MoliMed® Pants for men | ●             | ●            |

### 4. Produkteigenschaften

#### Materialien:

- Chassisvlies (Höschen): Polypropylen-Vlies, hydrophob, atmungsaktiv, weiß
- Saugkörper (dreilagig):
  1. Lage: 100 % elementarchlorfrei gebleichter Zellstoff
  2. Lage: Zellstoff-/ SAP-Gemisch
  3. Lage: Curled Fiber Dry-Plus Vlies
- Kleber: Hotmelt-Kleber
- Mittenvlies: Polypropylen-Vlies, hydrophil, weiß
- Innenbündchen: Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß
- Elastikfäden: Elastikfäden für Beinabschluss, Hüfte, Taille und Cuffs
- Wäscheschutzfolie: Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesauflage, weiß

## MoliMed® Pants for men




Spez.-Nr.: D 3.1234

Abteilung: CHO - ID

Datum: 31.07.2013

### 5. Produktskizze

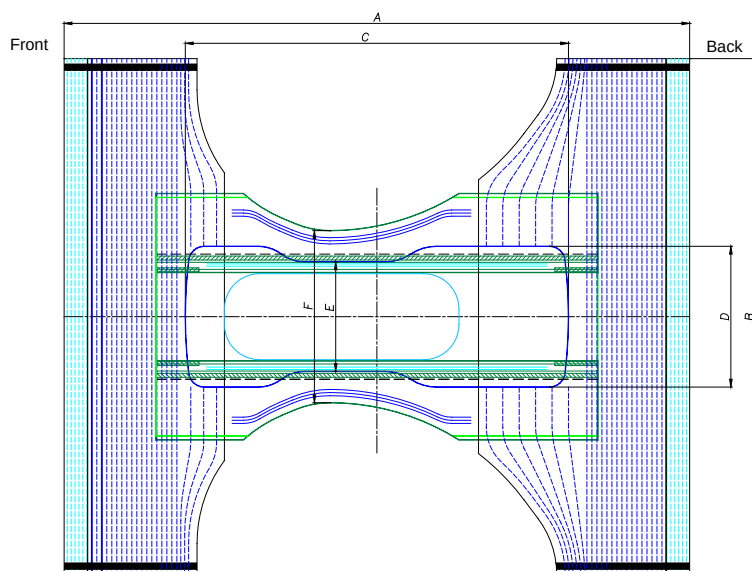

| Produkteignung    | Medium (M) | Large (L) |
|-------------------|------------|-----------|
| Bauchumfänge [cm] | 80 - 120   | 100 - 150 |

| Abmessungen [mm]          |   | Medium (M) | Large (L)  |
|---------------------------|---|------------|------------|
| Gesamtlänge:              | A | 800 ± 30   | 900 ± 30   |
| Gesamtbreite:             | B | 660 ± 10   | 810 ± 10   |
| Saugkörperlänge:          | C | 490 ± 20   | 580 ± 20   |
| Saugkörperbreite:         | D | 180 ± 10   | 180 ± 10   |
| Saugkörperbreite Schritt: | E | 140 ± 10   | 140 ± 10   |
| Schrittbreite:            | F | 220 -4/+10 | 220 -4/+10 |

## MoliMed® Pants for men



Spez.-Nr.: D 3.1234

Abteilung: CHO - ID

Datum: 31.07.2013

6. Produktanforderungen
**MoliMed® Pants for men**

| Prüfmerkmal:                   |     | Medium<br>(M) | Large<br>(L) |
|--------------------------------|-----|---------------|--------------|
| Gesamtgewicht*:                | [g] | 65 ± 10%      | 77 ± 10%     |
| SAP-Menge*:                    | [g] | 11 ± 10%      | 10 ± 10%     |
| Zellstoffgewicht*:             | [g] | 32,6 ± 10%    | 40,7 ± 10%   |
| 1. Einsickerzeit: <sup>a</sup> | [s] | max. 25       | max. 25      |
| 2. Einsickerzeit: <sup>b</sup> | [s] | max. 50       | max. 50      |
| 1. Rücknässung: <sup>a</sup>   | [g] | max. 0,15     | max. 0,15    |
| 2. Rücknässung: <sup>b</sup>   | [g] | max. 2,5      | max. 2,5     |

\* ± 10% Toleranz entspricht ± 3s    <sup>a</sup> mit 100ml Kochsalzlösung    <sup>b</sup> mit 200ml Kochsalzlösung

7. Kennzeichnung

Chargenschlüssel mit 9-stelligem Code:

z.B.:

|      |          |                    |
|------|----------|--------------------|
| 4    | 066      | XXXXX              |
| Jahr | lfd. Tag | interner Schlüssel |

8. Verpackung

MoliMed® Pants for men in Polyethylen-Presspack-Beutel verpackt; Transportkarton nach DIN, mit Klebestreifen verschlossen; Palettierung auf Europalette.

31.07.2013



i.A. Produktentwicklung