

APE SIN rapid



Flüssiger Kurzzeit Flächen-Desinfektionsreiniger

Zusammensetzung:

100 g APESIN rapid enthalten: 11g Didecylmethylammoniumchlorid, 10g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, 5 - 15% kationische Tenside, 5 - 15% nichtionische Tenside, <5% Phosphonate, Duftstoffe, Limonene, Linalool, alpha-Isomethylionone, Geraniol, Butylphenylmethylpropional
pH-Wert ca. 11

Leistung:

APESIN rapid enthält eine neuartige Wirkstoffkombination mit breitem Wirkungsspektrum bei extrem niedriger Anwendungskonzentration. Frei von Formaldehyd und sonstigen Aldehyden. Hervorragende Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Gute sensorische Akzeptanz bei Anwendungspersonal und Patienten. Dermatologisch getestet. APESIN rapid ist einsetzbar in dezentralen Dosiergeräten (BAM-geprüft). Bei Einsatz der 2L Dosierflasche einfache und zuverlässige Dosiermöglichkeit durch die integrierte Dosier- vorrichtung. Hohe Ergiebigkeit bzw. extrem wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration bei gleichzeitig kurzer Einwirkzeit.

Umfassend geprüft und begutachtet nach:

Dosierung/Einwirkzeit	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.	120 min.	240 min.
DGHM-VAH, geringe org. Belastung mit Mechanik	0,75%	0,5%	0,25%	0,125%		
DGHM-VAH, hohe org. Belastung mit Mechanik		0,5%		0,25%		
DVG Bereich A+B 10°C/20°C/z.B.				0,5%		
TBC			3,0%	1%		
Hepatitis B / HIV*		0,5%	0,5%	0,25%		
Hepatitis C (BVDV)*	0,25%	0,5%				
Rotaviren	0,25%					
Adenoviren			0,5%	0,25%		
Papovaviren						0,5%
Vakzinaviren*		0,5%				
Influenza A-Virus H ₁ N ₈	0,5%			0,25%		
Noravirus					1%	
**"begrenzt viruzid" wirksam gegen alle behüllten Viren.						
Geprüft nach den europäischen Normen EN 1040, 1275, 1276, 1650, 13697.						


Anwendungsbereich:

APESIN rapid ist auf allen wasserfesten Materialien im gesamten Krankenhausbereich, sowie in lebensmittelverarbeitenden Bereichen einsetzbar. Geeignet für Flächen und Gegenstände wie z.B. PVC/ PP/ PE/ Plexiglas, Gummi, Kunstharze, Linoleum, Messing, VA-Stahl, verchromte Armaturen usw. Durch das breite Wirkungsspektrum bei gleichzeitig kurzer Einwirkzeit auch bestens geeignet für Bereiche, die in besonderem Maße vor Infektionen geschützt oder von denen bevorzugt Infektionen ausgehen können. Geeignet auch für emulsionsgepflegte Böden.

Bestell-Nr.: 713178 2x5L

Bestell-Nr.: 713181 6x2L Standbeutel

Bestell-Nr.: 713179 4x2L Nachfüll-Dosierkanne

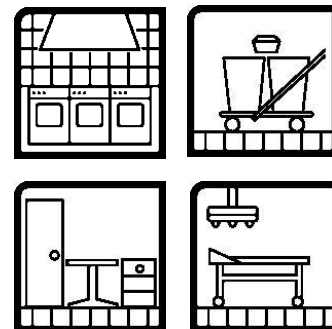

Zur Dosierung:

Weißes Flaschenverschluss abschrauben. Leichten Druck auf den Flaschenkörper geben, bis Dosierkammer gefüllt ist. Druck zurücknehmen. Konzentrat stellt sich auf die genaue Füllmenge von 20ml ein. Das Ausgießen wie bildlich dargestellt durchführen.

Zur Nachfüllung:

Roten Flaschenverschluss abschrauben. Leere 2L Dosierflasche mit APESIN rapid aus 2L Nachfüllbeutel befüllen. Rote Verschlusskappe aufschrauben. Bei Einsatz des 5L Kanisters 20ml (= 1 Hub der Dosierpumpe) auf 8L Wasser geben. Stets auf vollständige Benetzung (z.B. 40ml/m²) achten. Ausrüstung gut mit Wasser reinigen.

Besondere Hinweise:

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lagerung: Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.

Umweltschutz: Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. N-19241 N-19242

Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschrohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Produkt-Code: GD 40

