


PurQuip® Ergo | Reinraum-Reinigungssystem

Spezifikationen | Datenblatt

ISO GMP	3	4	5 A/B	6	7 C	8 D
------------	---	---	----------	---	--------	--------

Beschreibung:

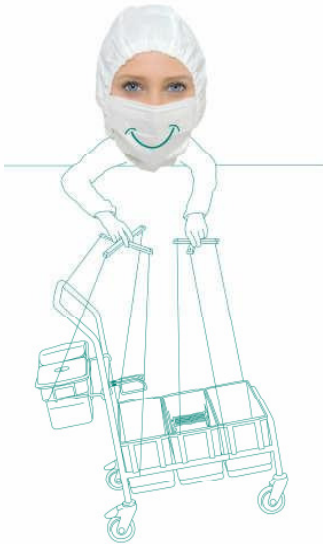

Die **PurQuip® Ergo-Serie** ist das einzige vollständig berührungsfreie Reinraum-Reinigungssystem. In Verbindung mit unserem benutzerfreundlichen Zubehör und der Auswahl an PurMop® Mopps, ergibt sich ein System mit herausragender Ergonomie.

Mit dem Ergo-System wird die Reinigung in Reinräumen wesentlich sicherer und effizienter gestaltet:

- kein Auspressen, nahezu kein Kraftaufwand
- ohne Handeln und Anfassen von Boxen, ohne Bücken
- kein Vortränken notwendig, dadurch keine Warte- / Standzeiten
- absolut reproduzierbar und sicher, leicht zu erlernen

Durch die innovative und patentierte Befeuchtungstechnik ist es möglich, die optimale Moppbefeuchtung **ohne Auspressen und Kraftaufwand sowie ohne Zeit- und Desinfektionsmittelverlust** umzusetzen!

Merkmale:



- Wagengestell aus elektropoliertem Edelstahl, Wannen aus Kunststoff (auch vollständig aus Edelstahl erhältlich: PurQuip® Ergo-S)
- Dauerhaft autoklavierbar, desinfektionsmittelbeständig
- Moppauflage ErgoMop®, Befeuchtungseinheit Ergo®
- Vollständig zerlegbar, einfach zu reinigen
- Moppabwurfsystem kompatibel zum Halter PurQuip® KKV40
- Abriebfreie, leitfähige Gummirollen
- Passend zu allen PurMop® Einweg- und Mehrweg-Mopps
- Für die Verwendung im Reinraum gem. DIN EN ISO 14644, GMP und VDI 2083 konzipiert

Anwendung / Einsatzgebiet:

Empfohlen für die sichere und ergonomische Reinigung aller Reinräume und Sterilbereiche (Böden, Wände, Decken)

Material:

Wagengestell und Befeuchter: Edelstahl 1.4301 elektropoliert
Wannen: Spezial-Kunststoff autoklavierbar

Passend dazu empfehlen wir:

PurQuip® SAK170 | Alu-/Kunststoff-Teleskopstiel
PurQuip® KKV40 | Kunststoff-Mopphalter



Arbeiten mit dem PurQuip® Ergo:



Berührungsfrei zum perfekten Ergebnis:

➔ **Schritt 1**

Aufnahme eines frischen Mopps von der Moppauflage (Kapazität: ca. 12 Mopps, einfach nachfüllbar)



➔ **Schritt 2**

Betätigung des Moppbefeuchters durch Drücken mit dem aufgespannten Mopp – die gewünschte Dosierung kann über die Anzahl der Betätigungen variiert werden (Volumen im Behälter ausreichend für bis zu 45 Mopps)



➔ **Schritt 3**

Abwurf des gebrauchten Mopps (nach erfolgtem Wischvorgang) mithilfe der Abwurftechnik in die dritte Wanne, ohne Berührung von Mopp oder Mopphalter

Vorteile gegenüber dem klassischen Edelstahlwagen mit Presse:

- Kein manueller Aufwand nötig, Arbeitsvorgang „Auspressen“ entfällt
- Keine Verschwendung von teurem Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Gewichts- und Platzeinsparung
- Berührungsfreier Moppabwurf in tiefer Arbeitshöhe, kein Handkontakt mit dem Mopp
- Absolut reproduzierbar, unterschiedliche Arbeitsweisen werden ausgeglichen
- Inklusive Wanne zum Abwurf der benutzten Mopps
- Höhere Prozesssicherheit durch gleichbleibende und anwenderunabhängige Flüssigkeitsdosierung

Erhältliche Ausführungen der PurQuip® Ergo-Reihe:



PurQuip® Ergo 300

- 1. Wanne mit Moppauflage
- 2. Wanne mit Befeuchter
- 3. Wanne zum Moppabwurf



PurQuip® Ergo 310

- 1. Wanne mit Moppauflage
- 2. Wanne mit Moppauflage
- 3. Wanne mit Moppbefeuchter
- 4. Wanne zum Moppabwurf



PurQuip® Ergo 320

- 1. Wanne mit Moppauflage
- 2. Wanne mit Befeuchter
- 3. Wanne zum Moppabwurf
- mit 2 kleinen Eimern hinten

Typ	Anzahlwannen vorne	Anzahlwannen hinten	Art.-Nr.
PurQuip® Ergo 300	3 Wannen 18 l	-	2123002
PurQuip® Ergo 310	3 Wannen 18 l	1 Wanne 18 l	2123003
PurQuip® Ergo 320	3 Wannen 18 l	2 Eimer 4 l	2123004

Abwurfmechanik für Reinigungswagen der Serie PurQuip® Ergo 3xx:

- berührungsfreier Abwurf, kompatibel zum Mopphalter PurQuip® KKV40
- aus elektropolierem Edelstahl
- mit Befestigungsschrauben

Artikelnummer/-bezeichnung:

2123010 | AME300



Abwurfmechanik optional

**MEHR EFFIZIENZ UND SICHERHEIT
BEI DER REINRAUM-REINIGUNG**