




Aufbereitung von DESCO WIPES und ECO WIPES Vliestuchspender mittels ULTRASOL OXY® SACHET

Vor jeder Wiederbefüllung eines DESCO WIPES und ECO WIPES Mehrweg-Vliestuchspenders ist eine vorbeugende Reinigung und Desinfektion erforderlich. Neben möglichen chemothermischen und thermischen Verfahren ist die manuelle Aufbereitung mittels ULTRASOL OXY Aufbereitungstüchern möglich. Jeder Nachfüllpackung liegen die ULTRASOL OXY Aufbereitungstücher bei. Es wird empfohlen, den Vliestuchspender vor der Aufbereitung einer visuellen Kontrolle zu unterziehen. Bei Abnutzungserscheinungen sind Deckel/Vliestuchspender auszutauschen. Zur Befüllung und Aufbereitung des Feuchttuchspenders und im Umgang mit Desinfektionsmitteln sind geltende Regeln des Personalschutzes zu beachten und geeignete Schutzausrüstung zu tragen (siehe BGR 250 / BGR 195 / BGR 206; Infos unter www.bgw-online.de). Die VAH-Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortränkssystem für die Flächendesinfektion¹ und die Mitteilung der VAH „Kontrollmaßnahmen bei der An-

wendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil² sind zu beachten. Im Falle eines mikrobiologischen Befundes sind neben der Aufbereitung auch die Befüllung, Anwendung und ggf. weitere Parameter als mögliche Ursache in Betracht zu ziehen und zu überprüfen.

1 Hyg Med 37. Jahrgang 2012, Mitteilung 3/2012 Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortränkssystem für die Flächendesinfektion

2 Hyg Med 38. Jahrgang 2013, Mitteilung 1/2013 Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von, Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil

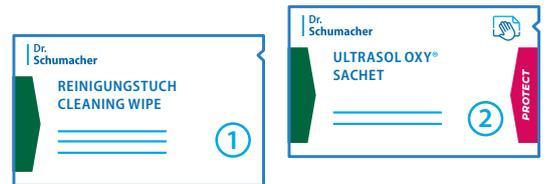

REINIGUNG ①

Innenseiten und Rand des neuen oder restentleerten Spenders mit dem Reinigungstuch gründlich reinigen.

Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich reinigen.

Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich reinigen.

DESINFEKTION ②

Innenseiten und Rand des Spenders mit dem Desinfektionstuch gründlich abwischen.

Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich abwischen.

*Einwirkzeit beachten

Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich abwischen.